

Wandklappliege

2-teilige Wandklappliege, längsseitig klappbar

Kopfteillänge: 550 mm

Kopfteil links: **Modell 125-00/L weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**

Modell 125-01/L verchromt

Modell 125-03/L weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 125-04/L graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Kopfteil rechts: **Modell 125-00/R weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)**

Modell 125-01/R verchromt

Modell 125-03/R weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 125-04/R graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)




Alle Abb.:
Modell 125-01/L

Funktion:

- Liege lässt sich **längsseitig** nach oben an die Wand oder nach unten an den Wandanschlag klappen
- **Einfache Handhabung** durch gasdruckfederunterstütztes Herausklappen und Sichern der Füße
- **Hohe Stabilität bei geringer Wandbelastung:**
Die Liege steht in funktionsbereitem Zustand auf ihren Füßen

Bitte beachten:

- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt
- Für andere Wandkonstruktionen sind Sonderhalter notwendig (Art.-Nr. 125-1380), die sich zusätzlich auf dem Boden abstützen (Voraussetzung: Es darf keine Sockelleiste im Aufstellbereich vorhanden sein.)

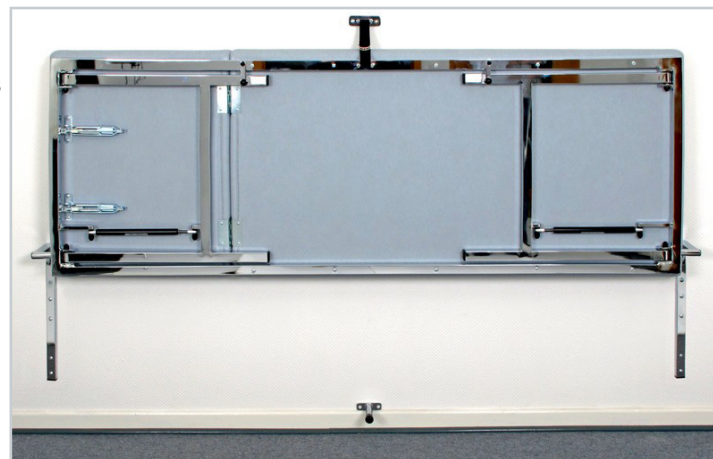

Technik:

- Liegengestell aus Vierkant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung



Grundausrüstung:

- Kopfteil positiv verstellbar
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:

- 2 Wandhalter zur Liegenbefestigung
- 1 Sicherungshalter mit Gurt zur Fixierung der Liege in hochgeklappter Stellung
- 1 Abstandhalter als Wandanschlag bei senkrecht nach unten geklappter Liege

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge mit Wandhaltern: 2.040 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 700 mm
- Gewicht: 35 kg
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 125-1380
Sonderwandhalter